

## Face Lifting Pad Механический массажёр для лица TM WellDerma



### Эргономичный дизайн:

- Изогнутая форма массажёра и вращающийся ролик позволяют эффективно проработать массажными движениями любой участок лица и тела.
- Плавные линии обеспечивают удобную фиксацию массажёра в руке.

### Многофункциональность:

- Для массажа лица и тела.
- Проведение массажа техникой гуаша (верхняя плоская часть) и по биоактивным точкам на лице – элементы шиацу (вращающийся ролик).

**Размеры:** 52×150×20 мм.

**Материал корпуса:** 100 % цинковый сплав, покрытый хромом.

**Материал ролика:** ABS-пластик.

### Действие:

- Улучшает локальное кровообращение и лимфоток.
- Устраняет отёки и выравнивает тон кожи.
- Способствует лифтингу овала лица.
- Повышает упругость и тонус кожи.
- Улучшает впитывание активных ингредиентов косметических средств.

## Базовые рекомендации по использованию массажёра

**Внимание!** Не используйте массажёр с усиленным надавливанием, это может привести к повреждению кожи или поломке массажёра.

1. Проводите массаж на очищенной коже. Перед выполнением процедуры рекомендуется нанести сыворотку, крем или масло, можно использовать массажёр на сухой коже.
2. При использовании техники гуаша верхняя плоская часть массажёра должна быть приподнята над кожей на 20–45 градусов.
3. Двигайте массажёр исключительно по направлению массажных линий / лимфотока без усиленного давления (до 10–15 раз по одному участку).
4. Вращающийся ролик используется для точечного массажа. Движения должны быть круговыми и легкими.
5. Для усиления противоотёчного эффекта рекомендуется использовать массажёр охлаждённым: перед применением поместите его в холодильник на 15–30 минут.
6. После использования массажёр необходимо промыть водой и насухо протереть.

### Меры предосторожности:

1. Не используйте массажёр, если у вас имеется аллергия на металлы. Это может привести к нежелательным реакциям на коже и проблемам со здоровьем.
2. Перед применением массажёра протестируйте его на небольшом участке тела, чтобы убедиться в отсутствии негативных реакций. Если во время массажа или после возникает покраснение, отёк, зуд или другие нежелательные реакции на коже, прекратите использование и обратитесь к дерматологу.
3. Начинайте использовать массажёр в течение короткого времени, постепенно увеличивая продолжительность массажа. Длительное применение может вызвать нежелательные реакции на коже.
4. Храните массажёр в сухом месте при комнатной температуре. Берегите от прямых солнечных лучей.
5. Для безопасности ваших детей храните массажёр в недоступном для них месте.

### Противопоказания:

- Высыпания на коже (воспаления, герпес, экземы и др.).
- Нарушения целостности кожного покрова на участках массажа (ссадины, открытые раны, царапины).
- Новообразования на участках массажа (папилломы, родинки, фибромы, бородавки).
- Наличие имплантатов на участках массажа.
- Состояние после проведения различных пилингов.
- Хирургическое вмешательство (включая инвазивные методы омоложения: золотые нити, процедуры мезо- и биоревитализации, введение ботулотоксина и филлеров).
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервной системы.
- Аллергические реакции, связанные с повышенной чувствительностью к металлам.

## Применение массажёра для лица



Движения от середины подбородка по нижней челюсти к мочке уха



Движения вокруг глаз. Верхнее веко: от внутреннего угла глаза к внешнему. Нижнее веко: от внешнего угла глаза к внутреннему



Движения узкой частью массажёра вокруг рта и по носогубной складке



Движения от крыльев носа к вискам



Движения от центра лба к вискам



Движения от переносицы вниз, к кончику носа



Круговые движения роликом от середины подбородка по нижней челюсти к мочке уха



Массажные движения роликом по носогубной складке и линии рта



Круговые массажные движения роликом от центра лба к вискам



Круговые массажные движения роликом вокруг глаз

## Применение массажёра для шеи и декольте



Движения узкой частью массажёра по передней поверхности шеи снизу вверх



Массажные движения в области ключицы – от центра к периферии



Круговые массажные движения роликом по передней и боковым поверхностям шеи



Круговые массажные движения роликом в области ключицы – от центра к периферии


## Применение массажёра для тела




Движения узкой частью массажёра по внутренней поверхности плеча



Движения узкой частью массажёра по нижней части линии груди от центра к периферии

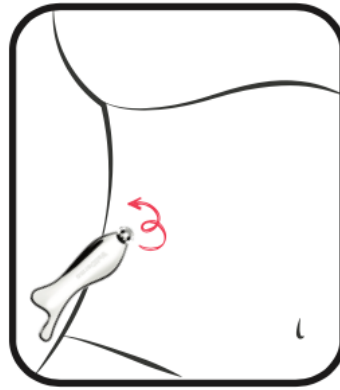

Круговые массажные движения роликом по боковой части живота

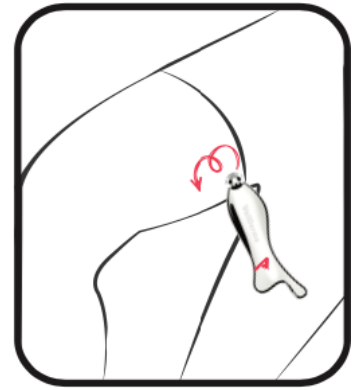

Круговые массажные движения роликом по внутренней части бедра